


Orbi-Shaker CO₂[™] / Orbi-Shaker CO₂[™] XL

- Entwickelt, um in die meisten CO₂-Inkubatoren zu passen und die Kapazität zu maximieren
- Ferngesteuert, Einstellungen anpassen, ohne die CO₂-Umgebung zu stören
- Horizontal kreisförmige 19mm Orbit für Belüftung und Mischen
- Schneller, einfacher und werkzeugfreier Austausch der Kolbenklammern dank patentiertem MAGicClamp[™] System

Kapazitäten:	O.S.CO ₂	O.S.CO ₂ XL
Gefäßgröße:	Anzahl	Anzahl
50 ml	30	49
100/125 ml	20	36
250 ml	14	25
500 ml	9	16
1000 ml	5	9
2000 ml	2	5
15 ml Zentr.	96	256
50 ml Zentr.	45	120
600 ml Zentr.	8	16

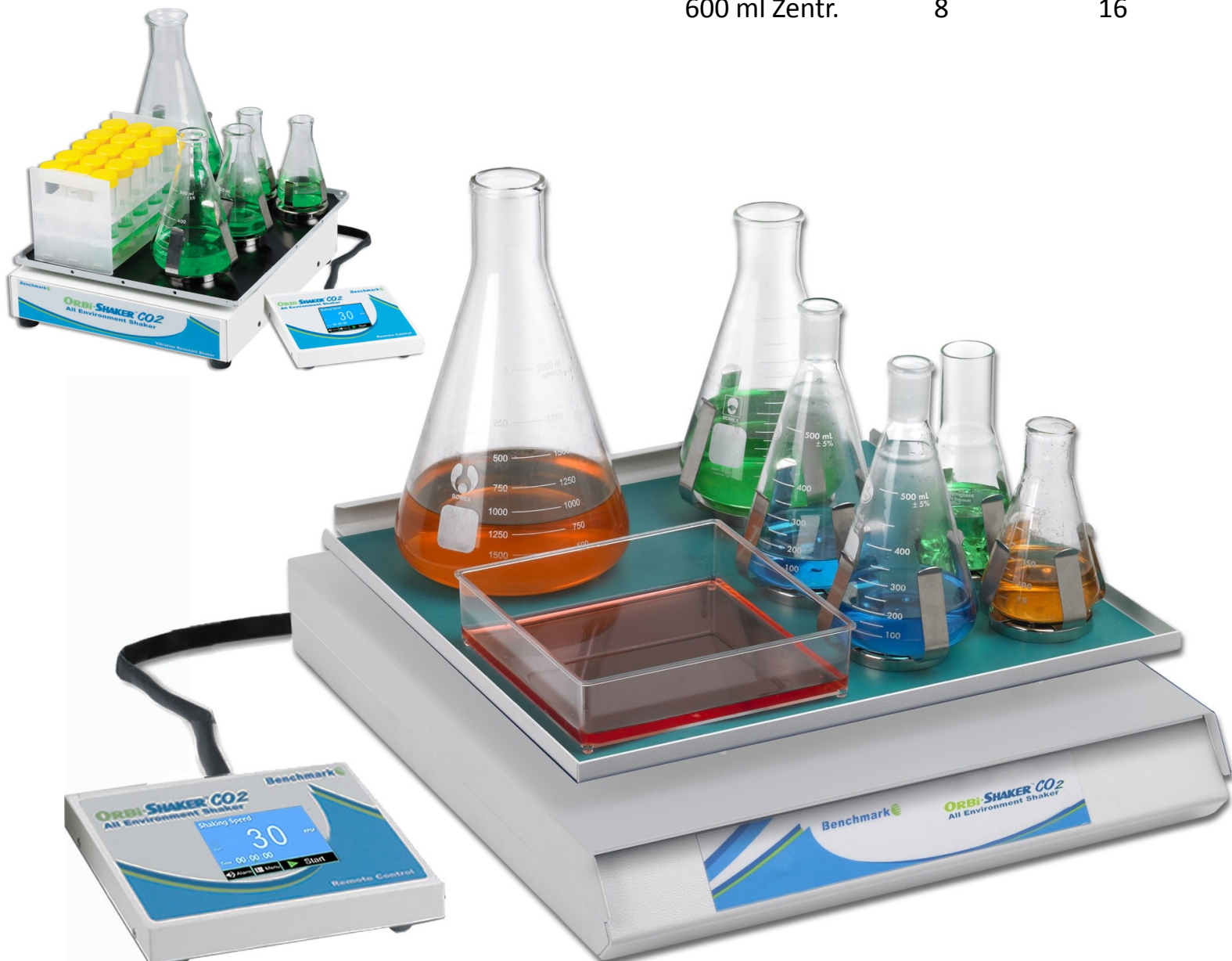

Orbi-Shaker CO₂TM / Orbi-Shaker CO₂TM XL



Technische Daten OrbiShaker CO₂ (OrbiShaker CO₂ XL):

Geschwindigkeit: Variabel 30 bis 300 U/min

Inkrement: 10 U/min

Orbit: 19 mm

Zeitsteuerung: 1 Min. bis 48 Stunden /
Dauerbetrieb

Arbeitstemperaturbereich: +4°C bis +65°C

Plattformgröße: 33 x 30 cm (42 x 41 cm)

MagicClamp Plattform optional: 35 x 30 cm
(42 x 41 oder 45 x 45 cm)

Tragfähigkeit: 6 kg (12kg)

Maße: 30 x 34 x 9 cm (43 x 46 x 13 cm)

Gewicht: 11,3 kg (22,7 kg)

Anschluss: 230 V, 50-60 Hz, 250 W

Garantie 2 Jahre

Die neue Orbi-Shaker CO₂-Serie wurde für Schüttel-, Misch- und Belüftungsanwendungen in extremen Umgebungen, einschließlich CO₂-Inkubatoren, entwickelt. Es kann Temperaturen von 0 bis 60°C und Luftfeuchtigkeit von bis zu 100% standhalten.

Zur Vermeidung von Verunreinigungen, ungewollten Gasaustritt oder Abweichungen vom Protokoll werden alle Einstellungen über das mitgelieferte Fernbedienungsmodul vorgenommen. Dieses Modul kann außerhalb der Kammer gelagert werden und wird über ein flaches (1 mm dickes) Kabel mit dem Schüttler verbunden, das leicht durch eine Kabeldurchführung oder unter einer Inkubatortür durchgeführt werden kann, ohne dabei die Abdichtung zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine Anpassung der Laufzeit oder Mischgeschwindigkeit durch den Benutzer, ohne die Kammertür zu öffnen.

Das Gerät wird mit einer rutschfesten Gummimattenplattform geliefert. Darüber hinaus sind optional praktische MAGICClampTM-Plattformen (in verschiedenen Größen) für die Verwendung mit Erlenmeyerkolben und Reagenzglasgestellen erhältlich. Die einzigartige und patentierte Magnetbefestigungsmethode wird weithin als der einfachste Weg zum schnellen, einfachen und direkten Wechsel zwischen Flaschenklammern verschiedener Größen ohne jedes Werkzeug anerkannt. Insbesondere, da in der oben beschriebenen Umgebung die Befestigung auch im feuchten Bereich einwandfrei möglich ist. (Im Unterschied zu Klebesystemen).

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot für einen passenden CO₂-Inkubator, bitte fragen Sie uns an.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	Orbi-Shaker CO ₂ TM mit Plattform 33 x 30 cm und rutschhemmender Gummimatte	170724	3.249,00 €/St.
1 Stück	MagicClamp Plattform für dto., 35 x 30 cm	170634	267,00 €/St.
1 Stück	Orbi-Shaker CO ₂ TM XL mit Plattform 42 x 41 und rutschhemmender Gummimatte	170725	4.269,00 €/St.
1 Stück	MagicClamp Plattform für dto., 45 x 45 cm	170745	343,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2019

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: