


- **Softstart**
- **Stufenlos einstellbare Drehzahl ( 10 - 100 RPM)**
- **Einstellbarer Neigungswinkel (3, 6, 9, 12°)**
- **Plattformgröße 41 x 34 cm**
- **Anti-Rutschmatte**
- **Leiser Antrieb**



Dieser Wippschüttler eignet sich zum gleichmäßigen schwenken von flachen Gefäßen wie beispielsweise Petrischalen und MTPs.

Das Schüttelgerät ist ein Wipp - Schüttler mit variabler Drehzahl. Der Neigungswinkel kann mit 3, 6, 9 oder 12° eingestellt werden. Die Drehzahl wird elektronisch nachgeregelt und gewährleistet einen sanften Start und sorgt für eine gleichbleibende und genaue Drehzahl. Die Schüttelplattform mit einer Größe von 42 x 35 cm ist mit einer rutschfesten, gummiähnlichen Matte ausgestattet, die Glas- oder Plastikgefäße und Schalen rutschfest halten.

Drehzahlbereich [1/min]: 10 - 100  
Art der Schüttelbewegung: wippend  
Wippwinkel: 3, 6, 9, 12, verstellbar  
Abmessungen der Schüttelplattform [mm]  
410 x 340 mm  
Last, max. [kg]: 2  
Stromversorgung: 230VAC 50Hz  
Gewicht [kg]: 3,9  
Maße: [mm]: 520 (b) x 100 (h) x 350 (t)  
Schutzart nach DIN EN 60529: IP32  
Überhitzungsschutz: Ja  
Überlastschutz: Ja  
Motorart: DC  
Rotation: CCW  
Betriebsart: Dauerlauf  
Zertifizierung: CE

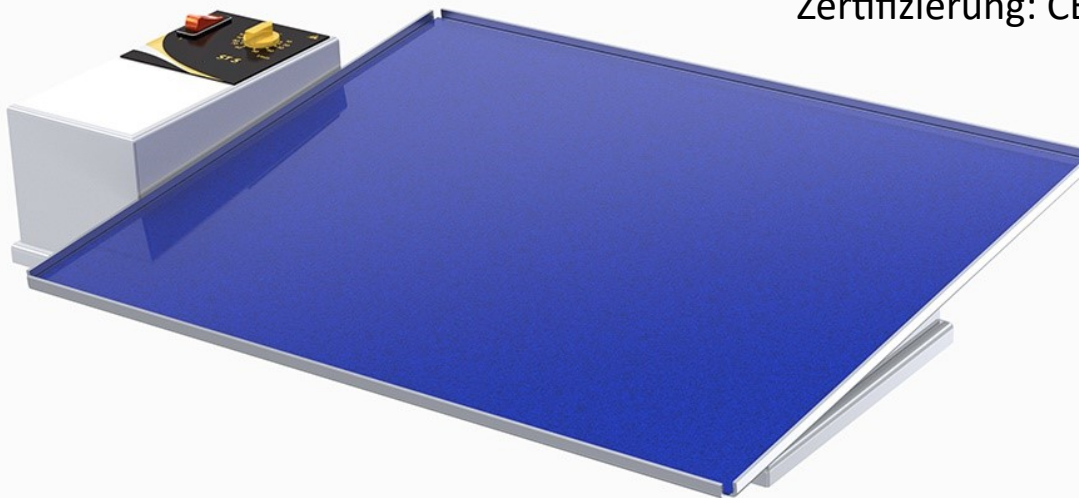

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Wippmischer RPM 10 - 100, Wippwinkel 3, 6, 9, 12 °	172716	760,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)  
Biberstraße 32  
89537 Giengen an der Brenz  
Tel.: 07322-91 11 329  
Mail: [info@jojo-ls.de](mailto:info@jojo-ls.de)  
Web: [www.jojo-ls.de](http://www.jojo-ls.de)

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: