



JoJoDNA-Mehrzweck-Elektrophorese-System Komplettsset für 4 Gelgrößen und unterschiedliche Probenzahlen durch diverse Käbme.

- PCR-Elektrophorese: Kamm 1mm, 27 Zähne \* 4 Reihen, 108 Proben auf einmal (inkl. Marke
- Freie Kombination von Gelträgern mit verschiedenen Spezifikationen: 130mmX130mm, 130mmX65mm, 65mmX130mm und 65mmX65mm
- Hochtemperaturbeständige UV-durchlässige Gelträger , keine Verformung bei 100°C, keine Notwendigkeit zu warten, dass die Agarose vor dem Gelgießen warm wird
- Keine Gummidichtungsringe, und die bewegliche Elektrode ist eingebettet, um ein Auslaufen der Flüssigkeit zu verhindern.
- Durchsichtiges PC-Gehäuse für einfache Probenvisualisierung
- Vielfältige Auswahl an handgegossenen Gelgrößen, geeignet für unterschiedliche experimentelle Anforderungen
- Verschiedene Größen von Agarosegelen können mit der enthaltenen Gießwannen gegossen werden.

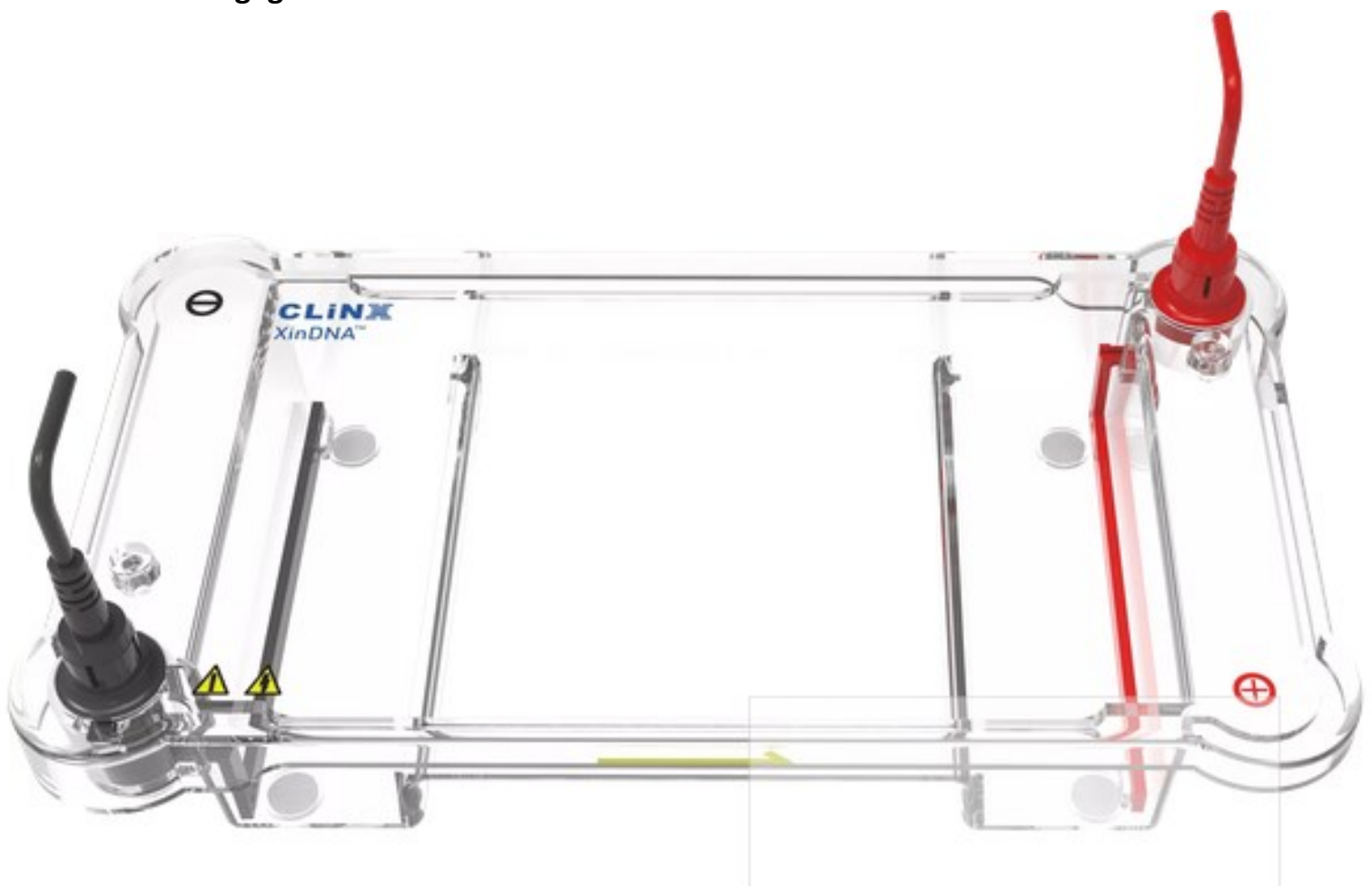

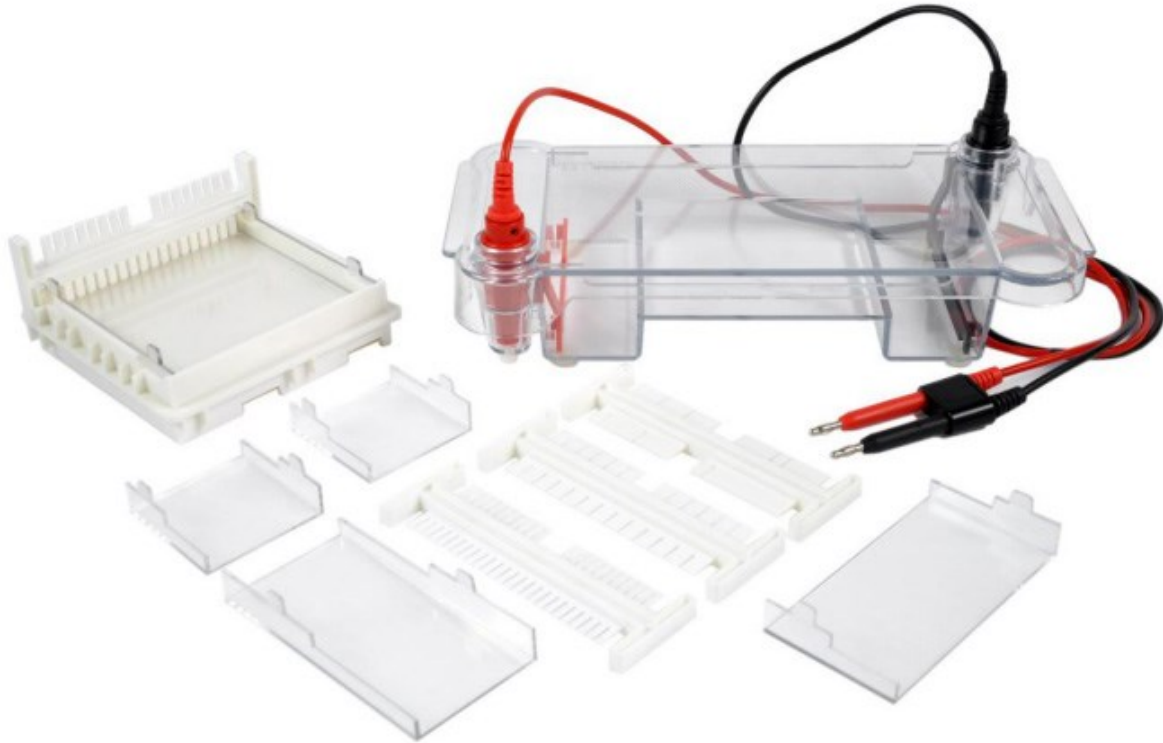

Das horizontale Mehrzweck-Elektrophorese-System JoJoDNA wird hauptsächlich für die Elektrophorese von Agarosegelen für DNA und RNA verwendet, wobei die speziell verwendete Gelgießplatte und die flexible Kombination von Trays mit ohrförmiger Struktur bequem zu verwenden sind. Es kann das Experiment der 96-Loch-PCR-Proben-elektrophorese mit verschiedenen Agarosevolumen und Größen wie 6,5x6,5 cm, 6,5x13 cm, 13x6,5 cm, 13x13 cm durchführen. Das Set besteht hauptsächlich aus Gelschale, Unterteil, Oberteil, Gelherstellungsset, Kämmen usw.

Gelkammer: 1 Stück, Oberer Deckel und Stromversorgungsleitung 1 Satz, Gel-Gieß-Rahmen 1 Stück, Elektrode: 1 Paar  
 Geltray: 13 x 13 cm, 1 Stück, 13 x 6,5 cm, 1 Stück, 6,5 x 13 cm, 1 Stück, 6,5 x 6,5 cm, 2 Stück  
 Doppelseitige Kämmen: 7+7/14 Vertiefungen, 0,75mm Dicke, 1 Stück, 9+9/19 Vertiefungen, 0,75mm Dicke, 1 Stück,  
 12+12/27 Vertiefungen, 1.0mm Dicke, 4 Stück, 7+7/14 Vertiefungen, 1.5mm Dicke, 1 Stück, 9+9/19 Vertiefungen, 1,5 mm dick, 1 Stück, 3+3/3+2 Vertiefungen, 2,0 mm dick, 1 Stück

Das Set erlaubt Ihnen sowohl Mini-, als auch Midi-Gele mit unterschiedlichen Probenzahlen zu gießen und zu nutzen. Dabei ist das Handling äußerst einfach.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJoDNA-Mehrzweck-Elektrophorese-System Komplettsatz für 4 Gelgrößen	172667	339,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2023

**JoJo Life Science UG** (haftungsbeschränkt)  
 Biberstraße 32  
 89537 Giengen an der Brenz  
 Tel.: 07322-91 11 329  
 Mail: [info@jojo-ls.de](mailto:info@jojo-ls.de)  
 Web: [www.jojo-ls.de](http://www.jojo-ls.de)

**Ihr Fachhandelspartner vor Ort:**