

## BeadBug™ 3

- Extrem leistungsstarkes Mischen zum Lysieren, Mahlen oder Homogenisieren
- Schneller und effektiver als Tissuemühlen
- Mischen Sie 1, 2 oder 3 Röhrchen gleichzeitig
- Extrem kompakt, weniger als 17 cm breit
- Beseitigt die Kreuzkontamination, die oft mit dem Dispergieren verbunden ist



## Bead-Homogenisator mit 3 Plätzen




Der BeadBug™ ist ein Hochleistungs-Benchtop-Homogenisator, der den Leistungsstandard für Disruptions- und Lyse-Instrumente im Personalbereich darstellt.

Die gleichzeitige Homogenisierung von bis zu 3 Proben erfolgt (oft innerhalb von 45 Sekunden) in den Einweg-2-ml-Schraubverschluss-Mikroröhrchen. Die optimierte Mischbewegung bewirkt einen schnellen Zellaufschluss durch den ständigen Hochgeschwindigkeitsaufprall der speziell für Ihren Probentyp ausgewählten gehärteten Mikrokügelchen.

Entwickelt für Proben, die zu hart sind, um in einem gängigen Labor-Vortexer homogenisiert zu werden, bietet der BeadBug eine bequeme und kostengünstige Alternative zu den traditionellen, oft sehr teuren Homogenisatoren, die heute auf dem Markt sind. Mit einer Probenkapazität von bis zu drei Röhrchen und einer Stellfläche von nur 17 x 21 cm ist der BeadBug das ideale Homogenisator für Labore mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz.

Technische Daten  
 Geschwindigkeit: 2.800-4.000 U/min  
 Kapazität: 3 x 2,0 ml Röhrchen (Schraubdeckel nötig)  
 Timer: 3 Sek. bis 3 Min.  
 Maße: 17 x 21 x 13,5 cm  
 Gewicht: 2,2 kg  
 Anschluss: 230 V, 50 Hz  
 Garantie: 2 Jahre

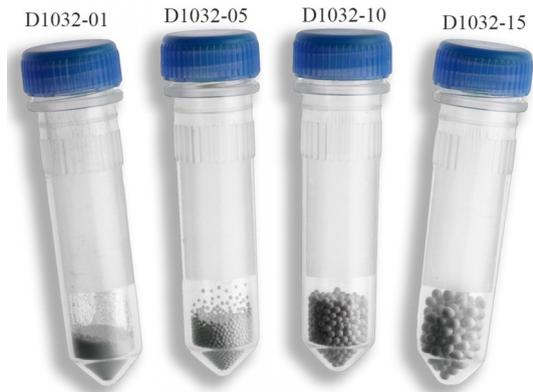

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	BeadBug™ 3, Homogenisator für bis zu 3 Röhrchen, 230 V	170254	779,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)  
 Biberstraße 32  
 89537 Giengen an der Brenz  
 Tel.: 07322-91 11 329  
 Mail: info@jojo-ls.de  
 Web: www.jojo-ls.de

**Ihr Fachhandelspartner vor Ort:**